

IMPORTANT: The Eye Care Professional should provide the patient with the appropriate Instructions that pertain to the patient's prescribed lenses and should discuss with the patient the risks associated with wearing and caring of contact lenses.

ACUVUE®

Brand Contact Lenses

Package Insert

CE
2797

English

IMPORTANT: Please read carefully and keep this information for future use

English

Important: Please read carefully and keep this information for future use. This Package Insert is intended for the Eye Care Professional but should be made available to patients upon request. This insert contains important information about the correct usage of ACUVUE® Brand Contact Lenses, which are listed in Table 1 and contains information about adverse reactions and contraindications.

Johnson & Johnson Medical Ltd provides ACUVUE® Brand Contact Lenses Patient Instruction Guides that contain further information for contact lens wearers. The Eye Care Professional should provide the patient with the Patient Instruction Guide that pertains to the patient's prescribed lens. Copies are available for download at local Acuvue website.

Table 1

Lens type and Brand name	Intended Use & Wear Schedule			Material	Polymer/water content (%)	Packaging Solution
	Daily Wear - Daily disposable	Daily wear Frequent replacement	Extended wear			
ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses - Visibility Tinted with UV Blocker						
ACUVUE®2 BRAND CONTACT LENSES		⊙	⊙	etafilcon A	42/58	①
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	⊙			etafilcon A	42/58	①
1-DAY ACUVUE® MOIST BRAND CONTACT LENSES WITH LACREON®	⊙			etafilcon A	42/58	③
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	senofilcon A ④	62/38	②
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HydraLuxe®	⊙			senofilcon A ④	62/38	②
1-DAY ACUVUE® Trueye® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® 1	⊙			narafilcon A ④	54/46	②
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	⊙			etafilcon A	42/58	③
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses		⊙		senofilcon C ④	59/41	②
ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™		⊙		senofilcon A ④ ⑤	62/38	②
ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM - Visibility Tinted with UV Blocker						
1-DAY ACUVUE® MOIST BRAND CONTACT LENSES FOR ASTIGMATISM WITH LACREON®	⊙			etafilcon A	42/58	③
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM		⊙		senofilcon C ④	59/41	②
ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRALUXE®	⊙			senofilcon A ④	62/38	②
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	senofilcon A ④	62/38	②
ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA - Visibility Tinted with UV Blocker						
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses MULTIFOCAL	⊙			etafilcon A	42/58	③
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	senofilcon A ④	62/38	②

Key

Packaging Solution: ① Borate buffered saline ② Borate buffered saline with methyl ether cellulose ③ Borate buffered saline with povidone.

Material content: ④ Lens material contains silicone and meets Class 1 UV absorbing standards with transmissibility of less than 1% UVB (280 -315 nm) and 10% UVA (316-380nm) radiation. All etafilcon A products meet Class 2 UV absorbing standards with transmissibility of less than 5% UVB and 50% UVA radiation. ⑤ Lens material contains a photochromic additive which dynamically absorbs visible light in the range from 380 nm to 780 nm to a minimum 84% transmittance in the inactivated (closed) state and to a minimum of 23% transmittance in the activated (open) state dependent on the lens thickness and the level of absorbed UV and high energy visible (HEV) radiation.

Symbols Key

The following symbols may appear on the label or packaging.

SYMBOL	DEFINITION
	Caution, Consult Instructions for Use
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Use By Date (expiration date)
	Batch Code
	Sterilized Using Steam Heat
	Do Not Use If Package Is Damaged
	Do Not Re-Use (Single Use)
DIA	Diameter
BC	Base Curve
D	Dioptre (lens power)
CYL	Cylinder
AXIS	Axis
MAX ADD	Highest near addition that can be corrected
LOW / L	"Low" near ADD
	Store Away from Direct Sunlight

SYMBOL	DEFINITION
MID / M	"Medium" near ADD
HGH / H	"High" near ADD
S_H	NATURAL SHIMMER™
S_P	NATURAL SPARKLE™
V	VIVID STYLE
A	ACCENT STYLE
N	NATURAL SHINE™
RB	Radiant Bright™
RC	Radiant Charm™
1-Month	1-Month Replacement
	Quality System Certification Symbol
 UV-Blocking	UV-Blocking
	Fee Paid for Waste Management
	CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed practitioner
	Lens Orientation Correct
	Lens Orientation Incorrect (Lens Inside Out)
	"Identification mark" for paper containers and wrapping
	"Identification mark" for composite materials
	Authorised Representative in the European Community

CONTENT

ACUVUE® Brand Contact Lenses are provided in sterile individual blister packages, with the lens immersed in borate buffered saline solution (see **Table 1** for Packaging Solution). **DO NOT USE** if the sterile blister package is opened or damaged.

INTENDED USE

ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses

Are intended for Daily Wear or Extended Wear, as shown in **Table 1**, for the optical correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia) in phakic or aphakic persons with non-diseased eyes who may have 1.00D or less of Astigmatism.

ACUVUE® OASYS with Transitions™ are photochromic contact lenses also indicated for the attenuation of bright light as they contain a photochromic additive which dynamically absorbs visible light.

1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® are also intended to enhance or alter the appearance of the eye.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for Astigmatism

Are intended for Daily Wear or Extended Wear, as shown in **Table 1**, for the optical correction of refractive ametropia (myopia and hyperopia) in phakic or aphakic persons with non-diseased eyes who may have astigmatism.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for Presbyopia

Are intended for Daily Wear or Extended Wear, as shown in **Table 1**, for the optical correction of distance and near vision in presbyopic, phakic or aphakic persons with non-diseased eyes who have 0.75D or less of astigmatism.

Additionally, ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS are also indicated for therapeutic use as a bandage lens for the following acute and chronic ocular conditions:

- For corneal protection in lid and corneal abnormalities such as entropion, trichiasis, tarsal scars and recurrent corneal erosion. In addition, they are indicated for protection where sutures or ocular structure malformation, degeneration or paralysis may result in the need to protect the cornea from exposure or repeated irritation.
- For corneal pain relief in conditions such as bullous keratopathy, epithelial erosion and abrasion, filamentary keratitis, and post-keratoplasty.
- For use as a barrier during the healing process of epithelial defects such as chronic epithelial defects, corneal ulcer, neurotrophic and neuroparalytic keratitis, and chemical burns.
- For post surgical conditions where bandage lens use is indicated such as post refractive surgery, lamellar grafts, corneal flaps, and additional ocular surgical conditions.

- For structural stability and protection in piggy back lens fitting where the cornea and associated surfaces are too irregular to allow for corneal rigid gas permeable (RGP) lenses to be fitted. In addition, the use of the lens can prevent irritation and abrasions in conditions where there are elevation differences in the host/graph junction or scar tissue. ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS when prescribed for therapeutic use may be worn for Daily Wear or Extended Wear.

ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR PLUS when prescribed for therapeutic use may be worn for Daily Wear or Extended Wear.

All ACUVUE® Brand Contact Lenses have UV Blocking to help provide protection against transmission of harmful UV radiation to the cornea and into the eye.

WARNING: UV absorbing contact lenses are NOT substitutes for protective UV absorbing eyewear such as UV absorbing goggles or sunglasses because they do not completely cover the eye and surrounding area. You should continue to use UV absorbing eyewear as directed.

Note: Long-term exposure to UV radiation is one of the risk factors associated with cataracts. Exposure is based on a number of factors such as environmental conditions (altitude, geography, cloud cover) and personal factors (extent and nature of outdoor activities). All ACUVUE® Brand Contact Lenses have UV blocking to help provide protection against transmission of harmful UV radiation to the cornea and into the eye. However, clinical studies have not been done to demonstrate that wearing UV blocking contact lenses reduces the risk of developing cataracts or other eye disorders. Consult your Eye Care Professional for more information.

WEAR SCHEDULE

The wearing and replacement schedule should be determined by the Eye Care Professional based upon the patient's history and their ocular examination, as well as the practitioner's experience and clinical judgment. Patients may tend to over wear the lenses initially. The Eye Care Professional should emphasise the importance of adhering to the initial maximum wearing schedule. Regular checkups, as determined by the Eye Care Professional, are also extremely important.

Daily Wear - Daily Disposable

ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed for Daily Wear - Daily Disposable (less than 24 hours, while awake) as shown in **Table 1**, are intended to be worn once on a daily disposable basis and are to be discarded upon removal. **When used in this way, no cleaning or disinfection is required.** Start each wearing period with a fresh new lens.

Daily Wear - Frequent Replacement

All ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses prescribed for Daily Wear – Frequent Replacement (less than 24 hours, while awake) as shown in **Table 1**, are to be discarded and replaced every month.

All other ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed for Daily Wear - Frequent Replacement, are to be discarded and replaced every two weeks.

All ACUVUE® Brand Contact Lenses as shown in **Table 1**, under the heading of Daily Wear - Frequent Replacement are to be cleaned, rinsed and disinfected each time the lens is removed using a chemical disinfection system only.

Extended Wear

ACUVUE® Brand Contact Lenses prescribed for Extended Wear, (greater than 24 hours, including while asleep) as shown in **Table 1**, may be used continuously for up to 7 days/6 nights and should be discarded upon removal. When used in this way, **no cleaning or disinfection is required. Start each wearing period with a fresh new lens.**

It is recommended that the new contact lens wearer first be evaluated on a Daily Wear - Frequent Replacement schedule. If in the opinion of the Eye Care Professional, the patient is determined to be an acceptable Extended Wear candidate, the Eye Care Professional is encouraged to determine a wear schedule based upon the response of the patient. Not all patients can achieve the maximum wear time.

Once removed, it is recommended that the lens remains out of the eye for a period of rest overnight or longer. The Eye Care Professional should examine the patient during the early stages of Extended Wear.

CONTRAINDICATIONS

DO NOT USE ACUVUE® Brand Contact Lenses when any of the following conditions exist, when prescribing for refractive ametropia use.

- Acute or subacute inflammation or infection of the anterior chamber of the eye.
- Any eye disease, injury or abnormality that affects the cornea, conjunctiva or eyelids.
- Severe insufficiency of lacrimal secretion (dry eye).
- Corneal hypoesthesia (reduced corneal sensitivity).
- Any systemic disease that may affect the eye or be exaggerated by wearing contact lenses.
- Allergic reactions of ocular surfaces or adnexa that may be induced or exaggerated by wearing contact lenses or use of contact lens solutions.
- Allergy to any ingredient, such as mercury or Thimerosal in a solution which is to be used to care for the lenses prescribed on a frequent replacement wear schedule.
- Any active corneal infection (bacterial, fungal, protozoal or viral).
- If eyes become red or irritated.

For THERAPEUTIC USE, the Eye Care Professional may prescribe ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS, to aid in the healing process of certain ocular conditions, which may include those cited above.

WARNINGS

(Daily Wear = less than 24 hours, while awake; Extended Wear = greater than 24 hours, including while asleep).

Proper use and care of contact lenses and lens care products, including lens cases, are essential for safe use. Problems from wearing contact lenses or using lens care products could result in serious injury to the eye.

Patients should be advised of the following warnings pertaining to contact lens wear :

- ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses are prescribed for daily wear and are for single use. Studies have shown that daily disposable soft contact lens wear reduces the risk of some complications including discomfort and inflammation that are associated with lens care and handling, and reuse can put you at greater risk of these problems.
- Problems with contact lenses or lens care products could result in serious injury to the eye. Patients should be cautioned that proper use and care of contact lenses and lens care products, including lens cases, are essential for the safe use of these products.
- Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision.
- Studies have shown that the risk of eye problems, including ulcerative keratitis is greater for extended wear contact lens users than for daily wear users.

- When daily wear users wear their lenses overnight (outside the intended indication), the risk of eye problems, including ulcerative keratitis is greater than among those who do not wear them overnight[†].
- The overall risk of eye problems, including ulcerative keratitis may be reduced by carefully following directions for lens care, including cleaning the lens case.
- Studies have shown that the risk of eye problems, including ulcerative keratitis among contact lens users who smoke is greater than among non-smokers.
- **Do not** expose contact lenses to **water** during swimming, other water sports or bathing as this **could** increase the risk of serious eye infection from microorganisms which could **lead to vision loss**. If lenses have been submersed in water, the patient should discard and replace them with a new pair. The Eye Care Professional should be consulted for recommendations regarding wearing lenses during any activity involving water.

Specific Instructions for Use and Warnings for Lenses Prescribed for Daily Wear Frequent Replacement and Extended Wear:

- Do not reuse or “top-off” old solution left in your lens case since solution reuse reduces effective lens disinfection and could lead to severe infection, vision loss, or blindness. “Topping-Off” is the addition of fresh solution to solution that has been sitting in your case.
- Discard any remaining solution after the recommended time period indicated on the bottle of multi-purpose solution used for disinfecting and soaking your contact lenses. The discard date refers to the time you can safely use the contact lens care product after the bottle has been opened. It is not the same as the expiration date, which is the last date that the product is still effective before it is opened.
- Using multi-purpose solution beyond the discard date could result in contamination of the solution and can lead to severe infection, vision loss, or blindness. To avoid contamination, DO NOT touch the tip of the container to any surface. Replace cap after using. DO NOT transfer to other bottles or containers.
- To adequately disinfect the lenses, rub and rinse the lenses according to the recommended lens rubbing and rinsing times in the labelling of the multi-purpose solution. Rub and rinse lenses for the recommended amount of time to help prevent serious eye infections.
- Never use water, saline solution, or rewetting drops to disinfect the lenses. These solutions will not disinfect the lenses. Not using the recommended disinfectant can lead to severe infection, vision loss, or blindness.
- Replace the lens case according to the directions given by the Eye Care Professional or the manufacturer’s labelling that accompanies the case.

[†] New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp. 773-783

- Empty and clean contact lens cases with digital rubbing using fresh, sterile disinfecting solutions/contact lens cleaner. Never use water. Cleaning should be followed by rinsing with fresh, sterile disinfecting solutions (never use water) and wiping the lens cases with fresh, clean tissue is recommended. Never air-dry or recap the lens case lids after use without any additional cleaning methods. If air-drying, be sure that no residual solution remains in the case before allowing it to air-dry.
- Do not store your lenses or rinse your lens case with water or any non-sterile solution. Only use fresh multi-purpose solution so you do not contaminate your lenses or lens case. Use of non-sterile solution can lead to severe infection, vision loss, or blindness.

If patients experience eye discomfort, excessive tearing, vision changes, redness of the eye or other problems are experienced, they should be instructed to immediately remove their lenses and the wearer should promptly contact their Eye Care Professional. It is recommended that contact lens wearers should see their Eye Care Professional routinely as directed.

PRECAUTIONS

What to do if problems occur

PLEASE ADVISE YOUR PATIENT TO REMOVE CONTACT LENSES IMMEDIATELY AND SEEK ADVICE FROM THEIR EYE CARE PROFESSIONAL.

Special Precautions for Eye Care Professionals

Due to the small number of patients enrolled in clinical investigation of lenses, all refractive powers, design configurations or lens parameters available in the lens material are not evaluated in significant numbers. Consequently, when selecting an appropriate lens design and parameters, the Eye Care Professional should consider all characteristics of the lens that can affect lens performance and ocular health, including oxygen transmissibility, wettability, central and peripheral thickness and optic zone diameter.

The potential impact of these factors on the patient's ocular health should be carefully weighed against the patient's need for refractive correction; therefore, the continuing ocular health of the patient and lens performance on the eye should be carefully monitored by the prescribing Eye Care Professional.

- Due to the reduction in light transmittance with cosmetically tinted lenses some patients may experience visual symptoms while wearing 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®. In addition, some patients may experience peripheral awareness due to the opaque iris pattern.

- Patients who wear the ACUVUE® Brand Contact Lenses to correct presbyopia using Monovision may not achieve the best corrected visual acuity for either far or near vision. Visual requirements vary with the individual and should be considered when selecting the most appropriate type of lens for each patient.
- Studies have shown that the risk of eye problems, including ulcerative keratitis is greater for extended wear contact lens users than for daily wear users.
- Fluorescein, a yellow dye, should not be used while the lenses are on the eyes. The lenses absorb this dye and become discolored. Whenever fluorescein is used in eyes, the eyes should be flushed with a sterile saline solution that is recommended for in-eye use.
- Eye Care Professionals should instruct patients to always have a functional pair of spectacles with a current prescription available to use if they become unable to wear contact lenses, or in circumstances where contact lens wear is not advised.
- Eye Care Professionals should instruct the patient to remove the lenses immediately if the eyes become red or irritated.
- Eye Care Professionals should inform the patient that there is no data available on the safety driving performance with ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses for individuals age 50 and older who may have crystalline lens opacities.
- Eye Care Professionals should carefully instruct patients about the following care regimen and safety precautions.

Handling Precautions

- Before leaving the Eye Care Professional's office, the patient should be able to put on and promptly remove lenses or should have someone else available who can put on and remove the lenses for him or her.
- **DO NOT** use if the sterile blister package is opened or damaged.
- **Always** wash hands with soap & warm water, rinse and dry hands with a clean lint-free towel before handling lenses to reduce the chance of getting an infection. Do not get cosmetics, lotions, soaps, creams, deodorants or sprays in the eyes or on the lenses. It is best to put on lenses before putting on makeup.
- Do not touch contact lenses with the fingers or hands if the hands are not free of foreign materials, as microscopic scratches of the lenses may occur, causing distorted vision and/or injury to the eye.
- Carefully follow the handling, insertion, removal, cleaning, disinfecting, storing and wearing instructions in the "Patient Instruction Guide" for ACUVUE® Brand Contact Lenses and those prescribed by the Eye Care Professional.
- **Always** handle lenses carefully and avoid dropping them.
- Never use tweezers or other tools to remove lenses from the lens container. Carefully remove the lens by sliding it up the side of the container.
- Do not touch the lens with fingernails.
- Close supervision is necessary for the Therapeutic use of all ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS. Ocular medications used during treatment with a bandage lens should be closely monitored by the Eye Care Professional. In certain ocular conditions, only the Eye Care Professional will insert and remove the lenses. In these cases, patients should be instructed not to handle the lenses themselves.

Lens Wearing Precautions

- If the lens sticks (stops moving) on the eye, follow the recommended directions in "Care for a Sticking Lens". The lens should move freely on the eye for the continued health of the eye. If non-movement of the lens continues, the patient should be instructed to immediately consult his or her Eye Care Professional.
- Never wear lenses beyond the period recommended by the Eye Care Professional.
- If aerosol products, such as hair spray, are used while wearing lenses, exercise caution and keep eyes closed until the spray has settled.
- Avoid all harmful or irritating vapours and fumes while wearing lenses.
- Never allow anyone else to wear your lenses. Sharing lenses greatly increases the chances of eye infections.
- The patient should be advised to never rinse the lenses in water from the tap. Tap water contains many impurities that can contaminate or damage the lenses and may lead to eye infection or injury.
- Be aware that wearing a darkened ACUVUE® OASYS with Transitions™ lens on only one eye is not recommended because it may cause disturbances in the patient's ability to accurately judge depth and the motion of objects. It may also create a cosmetic concern. Therefore, unilateral vision correction is not recommended for these contact lenses.
- Be aware that ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses are not intended for use as protection against artificial light sources, such as sun lamps, lasers, etc.
- The patient should be advised to never stare directly at the sun or at an eclipse with or without ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses.
- After the recommended wearing schedule, always discard lenses worn as prescribed by the Eye Care Professional.

Solution Precautions

- Different solutions cannot always be used together and not all solutions are safe for use with all lenses. Use only recommended solutions.
- The patient should not change solutions without consulting their Eye Care Professional.
- Never use solutions recommended for rigid gas permeable (RGP) contact lenses.
- Always use fresh, unexpired lens care solutions and lenses.
- Always follow directions in the package inserts for the use of contact lens solutions.
- Use only a chemical (not heat) lens care system. Use of a heat (thermal) care system can damage ACUVUE® Brand Contact Lenses.
- Sterile unpreserved solutions, when used, should be discarded after the time specified in the directions.
- Do not use saliva or anything other than the recommended solutions for lubricating or wetting lenses.

- Always keep the lenses completely immersed in the recommended storage solution when the lenses are not being worn (stored). Prolonged periods of drying will reduce the ability of the lens surface to return to a wettable state. Follow the lens care directions in "Care for a Dried Out (Dehydrated) Lens" if lens surface does become dried out.

Lens Case Precautions

- Lens cases can be a source of bacterial growth and require proper use, cleaning and replacement at regular intervals as recommended by the lens case manufacturer or Eye Care Professional.
- Always store individual unopened ACUVUE® OASYS with Transitions™ blisters out of direct sunlight.
- Always store worn ACUVUE® OASYS with Transitions™ contact lenses in the lens case and out of direct sunlight.

Other Topics to Discuss with Patients

- Always contact the Eye Care Professional before using any medicines or eye drops in the eyes.
- Certain medications, such as antihistamines, decongestants, diuretics, muscle relaxants, tranquilisers and those for motion sickness may cause dryness of the eye, increased lens awareness or blurred vision. Should such conditions exist, proper remedial measures should be prescribed.
- Oral contraceptive users could develop visual changes or changes in lens tolerance when using contact lenses. Patients should be cautioned accordingly.
- Do not change lens type (e.g. brand name, etc.) or parameters (e.g. diameter, base curve, lens power, etc.) without consulting the Eye Care Professional.
- Instruct patients to always confirm the lens parameters printed on the multi-pack and on the individual lens package match their prescription. If there is a mismatch the patient should not use the product.
- As with any contact lens, follow-up visits are necessary to assure the continuing health of the patient's eyes. The patient should be instructed as to a recommended follow-up schedule.

Who Should Know That the Patient is Wearing Contact Lenses?

- Patients should inform all doctors (Health Care Professional) about being a contact lens wearer.
- Always inform the employer of being a contact lens wearer. Some jobs may require use of eye protection equipment or may require that the patient not wear contact lenses.

ADVERSE REACTIONS

The patient should be informed that the following problems may occur when wearing ACUVUE® Brand Contact Lenses:

- The eye may burn, sting and/or itch.
- There may be less comfort than when the lens was first placed on the eye.

- There may be a feeling of something in the eye (foreign body, scratched area).
- There may be the potential for some temporary impairment due to peripheral infiltrates, peripheral corneal ulcers and corneal erosion. There may be the potential for other physiological observations, such as local or generalized oedema, corneal neovascularization, corneal staining, injection, tarsal abnormalities, iritis and conjunctivitis, some of which are clinically acceptable in low amounts.
- There may be excessive watering, unusual eye secretions, or redness of the eye.
- Poor visual acuity, blurred vision, rainbows or haloes around objects, photophobia, or symptoms of eye dryness may also occur if the lenses are worn continuously or for too long a time.

The patient should be instructed to conduct a simple 3-part self-examination at least once a day. They should ask themselves:

- How do the lenses feel on my eyes?
- How do my eyes look?
- Have I noticed a change in my vision?

If the patient reports any problems, he or she should be instructed to **IMMEDIATELY REMOVE THE LENS**. If the discomfort or problem stops, the patient should then look closely at the lens. If the lens is in any way damaged, the patient **SHOULD NOT** put the lens back on the eye. The patient should discard the lens and apply a new fresh lens on the eye.

If the lens has dirt, an eyelash, or foreign body on it, or the problem stops and the lens appears undamaged, he or she should be instructed to dispose of the lens and apply a new fresh lens. If the problem continues, the patient **SHOULD NOT** put the lens back on the eye but **IMMEDIATELY CONSULT HIS OR HER EYE CARE PROFESSIONAL**.

The patient should also be instructed **NOT** to use a new lens as self-treatment for the problem. The patient should be advised that when any of the above symptoms occur, a serious condition such as infection, corneal ulcer, neovascularization or iritis may be present. The patient should be instructed to seek immediate professional identification of the problem and prompt treatment to avoid serious eye damage.

During therapeutic use of ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS an adverse effect may be due to the original disease or injury or may be due to the effects of wearing a contact lens. There is a possibility that the existing disease or condition might become worse when a soft contact lens for therapeutic use is used to treat an already diseased injured eye. The patient should be instructed to avoid serious eye damage by contacting the Eye Care Professional **IMMEDIATELY** if there is an increase in symptoms while wearing the lens.

Lens care directions

When lenses are dispensed, the Eye Care Professional should provide the patient with appropriate and adequate warnings and instructions in accordance with the individual patient's lens type and wearing schedule. The Eye Care Professional should recommend an appropriate care system tailored to the patient's individual requirements.

Failure to follow the correct lens care regime may result in serious injury to the eye, as described in the section entitled – **“Warnings”**

For complete information concerning contact lens handling, care, cleaning, disinfecting and storage, refer to the Patient Instruction Guide for ACUVUE® Brand Contact Lenses.

When ACUVUE® Brand Contact Lenses are recommended for frequent replacement, as shown in **Table 1**, the lenses must be cleaned and disinfected following removal before re-use. The lenses may be disinfected using a chemical disinfection system only (e.g. multi-purpose or hydrogen peroxide system).

The Eye Care Professional should review with the patient lens care directions, including basic information on lens case cleaning as well as specific instructions on the lens care regimen recommended for the patient. Since some lens materials contain silicone, as shown in **Table 1**, the wettability may differ when different lens care products are used.

Care for a sticking (non-moving) lens

If the lens sticks (stops moving), the patient should be instructed to apply a few drops of a recommended lubricating or rewetting solution directly to the eye and wait until the lens begins to move freely on the eye before removing it. If non-movement of the lens continues after a few minutes, the patient should immediately consult the Eye Care Professional.

Care for a dried out (dehydrated) lens

If any ACUVUE® lens is off the eye for a prolonged period, its surface may become dry and gradually become non-wetting. If this should occur, discard the lens and use a new one.

EMERGENCIES

The patient should be informed that if chemicals of any kind (household products, gardening solutions, laboratory chemicals, etc.) are splashed into the eyes, the patient should: **FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH TAP WATER AND IMMEDIATELY CONTACT THE EYE CARE PROFESSIONAL OR VISIT A HOSPITAL CASUALTY DEPARTMENT WITHOUT DELAY.**

REPORTING OF ADVERSE REACTIONS

All serious adverse experiences and adverse reactions observed in patients wearing ACUVUE® Brand Contact Lenses or experienced with the lenses should be reported to:

(Johnson & Johnson Middle East) Inc.
Dubai Health Care City, Building 14, Level 7
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Academic Medical Centre,
PO Box 505080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971(4)4297747 Fax: +971(4)4297450
acuvuearabia@its.jnj.com
www.acuvuearabia.com

Additional information

For additional information concerning ACUVUE® Brand Contact Lenses and to order your free copy of ACUVUE® Brand Contact Lenses Patient Instruction Guides, please contact the address shown above.

Manufactured by:

Please refer to carton for site of manufacture



USA:

Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida, 32256
USA

IRELAND:


Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland



EU Authorised Representative:

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

www.acuvuearabia.com

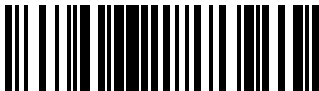

IN000372

**ACUVUE®
Contact Lenses Package Insert
(English)
IN000372**

©Johnson & Johnson Medical Limited. 2019

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE®, HYDRACLEAR®, ACUVUE OASYS®, HydraLuxe®, VITA®, TruEye®, DEFINE® and LACREON® are trademarks of Johnson & Johnson Medical Limited.

Transitions™ is a trademark of Transitions Optical, Inc., used under license by TOL and JJVCI.

Revision date: March 2019

التبليغ عن الاعراض الجانبية

يجب الابلاغ عن جميع التجارب السلبية الخطيرة وردود الفعل السلبية التي لوحظت على المرضى الذين يرتدون العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand أو ذوي الخبرة مع العدسات الى

(Johnson & Johnson Middle East) Inc.
Dubai Health Care City, Building 14, Level 7
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Academic Medical Centre,
PO Box 505080, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971(4)4297747 Fax: +971(4)4297450
acuvuearabia@its.jnj.com
www.acuvuearabia.com

معلومة اضافية

للحصول على معلومات إضافية حول العدسات اللاصقة الخاصة بعلامة ACUVUE® ولطلب نسختك المجانية من أدلة إرشادات المريض الخاصة بـ ACUVUE® ، يرجى الاتصال بالعنوان الموضح أعلاه.

صنع بواسطة:

يرجى الرجوع إلى الكرتون لموقع التصنيع



USA:

Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida, 32256
USA

IRELAND:

Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EU Authorised Representative:

AMO Ireland
Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

عندما يوصى بالاستعمال المتكرر للعدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses كما هو مبين بالجدول 1، عندئذ يجب تنظيف العدسات وتعقيمها عقب نزعها وقبل إعادة استخدامها. ويتم تطهير العدسات باستخدام نظام تعقيم كيميائي (مثل النظام متعدد المهام أو نظام بيروكسيد الهيدروجين).

يجب على أخصائي العيون أن يقوم بمراجعة التعليمات الخاصة بالعناية بالعدسات مع المريض بما في ذلك المعلومات الخاصة بتنظيف حافظة العدسات والتعليمات الخاصة بنظام العناية بالعدسات الذي ينصح به المريض. ونظراً لأن بعض المواد المستخدمة في تصنيع العدسات تحتوي على السليكون، كما هو مبين في الجدول 1، فقد تختلف القابلية للترطيب عند استخدام منتجات مختلفة للعناية بالعدسات.

العناية بالعدسات الثابتة (غير المتحركة)

في حالة التصاق العدسات بالعين (وتوقفت عن الحركة)، يجب توجيه المريض إلى وضع بضع قطرات من المحاليل المرطبة الموصى بها في العين مباشرة لجعل العدسة زلقة ورطبة والانتظار حتى تبدأ العدسات في التحرك بحرية قبل نزعها. وفي حالة استمرار عدم حركة العين بعد بضع دقائق فيجب على المريض استشارة أخصائي العيون على الفور.

العناية بالعدسات الجافة (غير رطبة)

إذا ظلت العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses خارج العين لفترة طويلة، قد يصبح سطحها جافاً وتفقد رطوبتها تدريجياً. إذا ما حدث ذلك، تخلص من العدسات واستخدم عدسات جديدة.

حالات الطوارئ

يجب إعلام المريض بأنه في حالة إصابة عينيه بأي كيمائيات من أي نوع (منتجات منزلية، محاليل زراعية، كيمائيات معملية...إلخ)، فيجب على المريض: شطف عينه على الفور بماء الصنبور والاتصال على الفور بأخصائي العيون أو زيارة قسم الطوارئ بأي مستشفى دون تأخير.

يجب أن يتم إصدار تعليمات للمريض بضرورة إجراء الاختبار الذاتي المكون من ثلاثة أجزاء مرة في اليوم على الأقل. كما يجب أن يسأل المرضى أنفسهم:

- كيف هو إحساس العدسات عندما تكون على عيني؟
- كيف تبدو عيني؟
- هل لاحظت تغيراً في قوة إبصاري؟

إذا ما اتسخت العدسات أو وقع عليها رمش أو جسم غريب أو إذا توقفت المشكلة وبدأت العدسات غير متضررة، فيجب توجيهه بالتخلص من العدسات واستبدالها بأخرى جديدة. في حالة استمرار المشكلة، يجب على المريض ألا يضع نفس العدسات مرة أخرى على عينيه ويجب عليه أن يستشير على الفور أخصائي العناية بالعين.

كما يجب توجيه المريض أيضاً بألا يقوم باستخدام عدسات جديدة من تلقاء نفسه كحل ذاتي للمشكلة. يجب إعلام المريض بأنه في حالة حدوث أي من الأعراض السابقة فلا بد أن هناك حالة من الحالات الخطرة مثل العدوى أو التهاب القرنية القرصي أو اتساع الأوعية الدموية بالقرنية أو التهاب القرنية. كما يجب توجيه المريض إلى ضرورة السعي إلى التحديد الفوري لأسباب المشكلة لدى المختصين مع العلاج الفوري لتجنب حدوث أضرار جسيمة بالعين.

قد تحدث بعض الآثار السلبية أثناء الاستخدام العلاجي نظراً لوجود مرض أو إصابة أصلية بالعين أو قد يكون ذلك من آثار استخدام العدسات اللاصقة. وربما يتفاقم المرض أو تستفحل الإصابة عند استخدام العدسات اللاصقة المرنة للعلاج في العين المصابة بالمرض بالفعل. ويجب توجيه المريض إلى تجنب إحداث ضرر جسيم بالعين وذلك من خلال الاتصال بأخصائي العيون على الفور إذا زادت الأعراض عند استخدام العدسات.

التعليمات الخاصة بالعناية بالعدسات

عند وصف العدسات، يجب على أخصائي العناية بالعيون (الذي يشمل أخصائيي البصريات وأطباء العيون) أن يزود المريض بالتحذيرات والتعليمات المناسبة التي تتوافق مع نوع عدسات المريض وجدول الاستخدام. كما يجب على أخصائيي العيون أيضاً أن يوصي بمحلول تنظيف مناسب يلائم المتطلبات الفردية للمريض.

قد يؤدي الفشل في اتباع النظام الصحيح للعدسات اللاصقة إلى حدوث إصابات بالغة في العين هو كما موضح في القسم المسمى «تحذيرات»

للحصول على معلومات كاملة عن استخدام العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses أو العناية بها أو تنظيفها أو تطهيرها أو تخزينها يرجى الاطلاع على دليل إرشادات المرضى الخاص بها.

الاحتياطات الخاصة بحافظة العدسات

قد تصبح حافظات العدسات اللاصقة مصدراً لنمو البكتيريا، لذلك تتطلب الاستخدام السليم والتنظيف والاستبدال بانتظام وذلك على النحو الذي تُوصي به جهة تصنيع حافظة العدسات أو أخصائي العيون.

قم دائماً بتخزين الشرائط الفردية المغلقة من العدسات اللاصقة ACUVUE® OASYS مع Transitions™ بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قم دائماً بتخزين العدسات اللاصقة المستعمله ACUVUE® OASYS مع Transitions™ في علبة العدسة وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

موضوعات أخرى يجب مناقشتها مع المرنى

- كن على تواصل دائم بأخصائي العناية بالعيون عند استخدام أي أدوية بالعين أو قطرات العيون بالعين.
- قد تسبب بعض الأدوية كمضادات الهستامين ومضادات الاحتقان ومدرات البول والعقاقير الباسطة للعضلات ومهدئات الأعصاب والعقاقير الخاصة باعتلال الحركة، جفافاً بالعين أو زيادة الشعور بوجود العدسات أو اضطراب الرؤية، وفي حالة وجود أي من الحالات السابقة، فيجب وصف الإجراءات العلاجية السليمة. بناءً على شدة الحالة، قد تشمل هذه الإجراءات على استخدام قطرات المرطبة التي توصف للاستخدام مع العدسات اللاصقة أو التوقف المؤقت عن استخدام العدسات اللاصقة عند استخدام مثل هذا العلاج.

- مستخدمات حبوب منع الحمل قد يعانين من عدم ثبات الرؤية أو تغير في درجة تحملهن للعدسات

اللاصقة. لذا يجب تنبيههن مسبقاً لهذا الشأن.

- لا تغير نوع العدسة (مثل اسم الماركة ، إلخ) أو المعلومات (على سبيل المثال القطر والمنحنى الأساسي وقوة العدسة وما إلى ذلك) دون استشارة أخصائي العيون
- قم بإرشاد المرنى إلى التأكد دائماً من أن علامات المطبوعة على العبوة المتعددة وعلى عبوة العدسات الفردية تطابق وصفتهن الطبية. إذا كان هناك عدم تطابق، يجب على المريض عدم استخدام المنتج

- كما هو الحال بالنسبة لأي نوع من العدسات اللاصقة، تكون المراجعات مع المختص ضرورية من أجل ضمان الحفاظ على سلامة عين المريض. كما يجب توجيه المريض باتباع جدول المتابعة الموصى به. من الذي يجب إخباره باستخدام عدسات لاصقة؟

- يجب على المريض إبلاغ جميع الأطباء (أخصائي الرعاية الصحية) عن كونه مرتد للعدسات اللاصقة
- أخبر صاحب العمل دائماً بأنك ترتدي عدسات لاصقة. بعض الوظائف قد تتطلب أجهزة حماية للعين أو قد تشترط ألا يرتدي الموظف عدسات لاصقة.

التفاعلات العكسية

يجب إحاطة علم المريض بالمشاكل التي قد تحدث عند ارتداء العدسات اللاصقة

ACUVUE® Brand Contact Lenses:

- قد يكون هناك شعور بحرقان أو وخز و/أو شعور بضرورة حك العين.
- قد ينتاب المريض الشعور بعدم الارتياح عند لبس العدسات للمرة الأولى.
- قد ينتاب المريض شعور بوجود شيء ما بالعين (جسم غريب أو حكة).
- ومن المحتمل حدوث قصور مؤقت في الرؤية نتيجة للرشح الطرقي وقُرح بالقرنية.
- ومن المحتمل أيضاً ظهور علامات فيسيولوجية أخرى، مثل الاستسقاء الموضعي أو العام وتمدد الشعيرات الدموية داخل القرنية وبقع القرنية وحقق واضطرابات بالجفن والتهابات القرنية والملتحمة، التي تكون بعضها مقبولة من الناحية الإكلينيكية عند اقترانها على مستوى محدود
- قد يكون هناك قدر زائد من الدموع أو إفرازات غير معتادة من العين أو احمرار بالعين.
- قد يحدث ضعف لحدة الإبصار وعدم وضوح الرؤية ورؤية أقواس قزح أو هالات حول الأشياء أو رهاب رهاب الضوء أو جفاف العين إذا ما تم ارتداء العدسات باستمرار أو تم ارتداؤها لمدة طويلة.

الاحتياطات الخاصة باستخدام العدسات

- في حالة التصاق العدسات بالعين (التوقف عن الحركة)، قم بإتباع التوجيهات الموصى بها في «العناية بالعدسات اللاصقة». يجب أن تتحرك العدسات بحرية على العين من أجل ضمان سلامة العين وصحتها.
- في حالة استمرار عدم حركة العدسات، فيجب توجيه المريض إلى ضرورة استشارة أخصائي العناية على الفور.
- لا ترتدي العدسات لمدة تتجاوز المدة التي يوصي بها أخصائي العيون.
- في حالة استخدام منتجات الإيروسول مثل بخاخ الشعر أثناء وضع العدسات ينبغي توخي الحذر وإغلاق العينين حتى الانتهاء من تثبيت بخاخ الشعر.
- تجنب جميع الأبخرة والأبخرة الضارة أو المزعجة أثناء ارتداء العدسات.
- لا تسمح أبداً لأي شخص آخر بارتداء عدساتك. مشاركة العدسات تزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بالتهابات العين أو الضرر.
- يجب أن ينصح المريض بعدم شطف العدسات في الماء من الصنبور يحتوي ماء الصنبور على العديد من الشوائب التي يمكن أن تلوث العدسات أو تتلفها وقد تؤدي إلى إصابة العين أو الإصابة.
- يجب أن تدرك أن ارتداء عدسات ACUVUE® OASYS with Transitions™ الغامقة على عين واحدة فقط لا ينصح به لأنه قد يسبب اضطرابات في قدرة المريض على الحكم بدقة على العمق وحركة الأشياء. قد يتسبب أيضاً في مخاوف تجميلية. لذلك، لا ينصح بتصحيح الرؤية من جانب واحد باستعمال العدسات اللاصقة هذه.
- يجب أن يُنصح المريض بعدم التحديق في الشمس أو كسوف الشمس مع أو بدون عدسات ACUVUE® OASYS with Transitions™ اللاصقة.
- يجب أن تدرك أن عدسات ACUVUE® OASYS with Transitions™ اللاصقة غير مخصصة للاستخدام كحماية ضد مصادر الضوء الاصطناعي، مثل مصابيح الشمس، وأشعة الليزر، إلخ.
- بعد اتباع جدول الاستخدام الموصى به، تخلص دائماً من العدسات التي سبق استخدامها على النحو الذي يصفه أخصائي العيون.

الاحتياطات الخاصة بالمحلول

- يجب عدم استخدام محاليل مختلفة في نفس الوقت فليست جميع المحاليل مأمونة الاستخدام مع جميع العدسات. لذا، استخدم المحاليل الموصى بها فقط.
- يجب على المريض ألا يغيّر المحاليل دون الرجوع إلى أخصائي واستشارته.
- لا تستخدم لتنظيف العدسات اللينة محاليل العدسات اللاصقة الصلبة المنفذة للغاز (RGP).
- استخدم دائماً العدسات ومحاليل العناية الجديدة غير منتهية الصلاحية.
- اتبع دائماً التعليمات الموجودة داخل العبوة والخاصة باستخدام محاليل العدسات اللاصقة.
- استخدم فقط نظام العناية الكيميائي (النشرة الطبية الإرشادية) في العناية بالعدسات. قد يؤدي استخدام نظام العناية الحراري إلى تلف العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses.
- يجب التخلص من المحاليل المعقمة غير المحفوظة بعد الوقت المحدد في التعليمات.
- لا تستخدم للعباب أو أي محلول آخر غير تلك الموصى بها لكي تجعل العدسات زلقة أو رطبة.
- احرص على بقاء العدسات مغمورة تماماً في محلول العدسات الموصى به في حالة عدم استخدامه (التخزين). سيؤدي استمرار بقاء العدسات جافة لفترات طويلة إلى تقليل قدرة سطح العدسات على الرجوع إلى الحالة الرطبة. اتبع التعليمات الخاصة بالعناية بالعدسات الواردة في الجزء الخاص «بالعناية بالعدسات الجافة» إذا ما جفت العدسات بالفعل.

- يجب ألا يُستخدم الفلوروسين - الصبغة الصفراء - أثناء وجود العدسات بالعين. وذلك لأن العدسات تمتص هذه الصبغة وتغير لونها. وفي حالة وضع الفلوروسين في العين، يجب أن يتم شطفها بمحلول ملحي معقم من الأنواع الموصى باستخدامها.
- يجب على أخصائيي العناية بالعيون توجيه المريض إلى الحصول دائماً على نظارة وظيفية مع وصفة طبية حالية متاحة للاستخدام إذا لم يتمكنوا من ارتداء العدسات اللاصقة ، أو في الحالات التي لا ينصح فيها بارتداء العدسات اللاصقة.
- يجب على متخصصي العناية بالعيون توجيه المريض لإزالة العدسات فوراً إذا أصبحت العين حمراء أو متهيجة.
- يجب على أخصائيي العيون إبلاغ المريض بأنه لا توجد بيانات متوفرة عن أداء القيادة الآمنة مع عدسات ACUVUE® OASYS with Transitions™ اللاصقة للأفراد الذين يبلغون 50 عاماً فأكثر والذين قد يعانون من عتامة العدسة البلورية.
- يجب على أخصائيي العيون توجيه المريض بعناية حول نظام الرعاية واحتياطات السلامة التالي.

احتياطات الاستخدام

- يجب على المريض قبل مغادرته مكتب أخصائيي العيون أن يكون قادراً على نزع العدسات على الفور أو أن يكون معه شخص يستطيع نزع العدسات له أو لها.
- لا تقم باستخدام العدسات إذا كانت الحافظة المعقمة مفتوحة أو تالفة.
- اغسل واشطف يديك دائماً قبل وضع العدسات. لا تلمس العدسات. لا تلمس العدسات باليد. لا تلمس العدسات بالماء. لا تلمس العدسات بالمواد الكيميائية أو الكريمات أو المعطرات أو الرذاذ إلى داخل العين أو العدسات. من الأفضل وضع العدسات قبل وضع الماكياج. يقل احتمال وجود تأثير ضار لمواد التجميل التي يتكون الجزء الغالب منها من الماء على العدسات وذلك بعكس المواد المكونة من الزيوت.
- لا تلمس العدسات اللاصقة بإصبعك أو يديك إن لم تكن خالية من المواد الغريبة حيث قد تصاب العدسات بخدوش دقيقة مما ينتج عنه تشوش الرؤية و/أو إصابة العين.
- اتبع التعليمات الخاصة بالاستعمال والإدخال والنزع والتنظيف والتطهير والتخزين والاستخدام الموجودة «بإدليل إرشادات المرضى» الخاص بالعدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses بالإضافة إلى تلك التعليمات التي ينصح بها أخصائيي العيون.
- استخدم العدسات بعناية وتجنب وقوعها.
- لا تستخدم الملقط أو أي أداة أخرى لإخراج العدسة من حافظة العدسات إلا إذا كانت التعليمات الخاصة بهذا الاستخدام تقضي بذلك. قم بتفريغ كل من العدسات ومحلول التعبئة على راحة اليد.
- لا تلمس العدسات بأظفارك.
- المتابعة عن قرب ضرورية في حالة استخدام جميع العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS للأغراض العلاجية. يجب على أخصائيي العناية بالعيون أن يقوم بمتابعة العلاجات البصرية أثناء العلاج بالعدسات الضمادية، مع العلم بأنه وفي بعض الحالات العلاجية المحدودة يجب وضع العدسات ونزعها بواسطة أخصائيي العيون فقط في هذه الحالات يجب إرشاد المرضى بألا يتعاملوا مع العدسات بأنفسهم.

- افرك ونظف حافظات العدسات اللاصقة بالفرك بالإصبع باستخدام محاليل تعقيم / تنظيف للعدسات اللاصقة جديدة ومعقمة. لا تستخدم الماء مطلقاً. يجب أن يتبع التنظيف الشطف بمحلول تعقيم جديد ومعقم (لا تستخدم الماء أبداً) ويوصى بمسح حافظات العدسة باستخدام مناديل نظيفة ونظيفة. لا تترك غطاء حافظات العدسات ليحفظ بالهواء أبداً ولا تغطي حافظات العدسة بالغطاء بعد الاستخدام من دون أي طرق تنظيف إضافية. في حالة التجفيف بالهواء، تأكد من عدم وجود أي محلول متبقي في الحافظة قبل أن تدعها تجف بالهواء.
- لا تقم بتخزين العدسات في الماء أو شطف حافظة العدسات بالماء أو أي محلول غير معقم. استخدم فقط المحلول متعدد الأغراض الجديد حتى لا تلوث العدسات أو حافظة العدسات. يمكن أن يؤدي استخدام محلول غير معقم إلى التهابات شديدة، أو فقدان البصر، أو العمى.

إذا كان المريض يعاني من عدم ارتياح في العين أو إفراز دمعي زائد أو تشوش في الرؤية أو احمرار بالعين أو أي مشاكل أخرى، فيجب على أخصائي العيون أن يوجههم إلى نزاع العدسات في الحال ويتعين على مستخدم العدسات الاتصال بأخصائي العيون المتابع لحالته على الفور. كما ينصح بأن يقوم مستخدمو العدسات بالذهاب إلى أخصائي العيون بشكل منتظم وفقاً للتعليمات.

الاحتياطات:

ماذا يجب فعله في حالة حدوث مضاعفات.

يرجى نصيح مريضك بنزع العدسات اللاصقة فوراً وأن يقوم باستشارة أخصائي العيون.

احتياطات خاصة لأخصائي العناية

نظراً لمحدودية عدد المرضى شاركوا في الدراسات الطبية الخاصة بالعدسات، فلن يتسن تقييم القدرات الانكسارية وتكوينات التصميم ومحيطات وأبعاد المواد الداخلة في صنع العدسات بأعداد كبيرة. ومن هنا فعند اختيار التصميم والأبعاد المناسبة للعدسات يجب على أخصائي العناية أن يضع في اعتباره جميع خواص العدسات التي يمكن أن تؤثر على أداء العدسات وصحة العين بما في ذلك درجة انتقال الأوكسجين، والقابلية للتطبيب، والسماكة المركزية وعلى الأطراف، وقطر المنطقة البصرية بالعدسة.

كما يجب مفاضلة التأثير المحتمل لهذه العوامل مجتمعة على صحة عين المريض مقارنة بحاجة المريض إلى تصحيح الرؤية البصرية. لذلك، يجب متابعة صحة البصر الخاصة بالمريض علاوة على أداء العدسات للعين من خلال أخصائي العيون.

- نظراً لانخفاض عملية توصيل الضوء في العدسات اللاصقة الملونة العادية، فإن بعض المرضى قد يختبرون عوارض بصرية خلال استخدامهم للعدسات اللاصقة 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض المرضى من الوعي المحيطي بسبب نمط القرنية غير الشفاف.

- مستخدمو العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses لتصحيح طول البصر الشيخوخي وبإستعمال العدسات أحادية الرؤية وفي بعض الأحيان قد لا يحصلون على القدر الأفضل من حدة الإبصار المصححة سواء من ناحية الرؤية البعيدة أو القريبة. تختلف المتطلبات البصرية وفقاً للفرد ويجب أن يوضع ذلك في الاعتبار عند اختيار أنواع العدسات ملائمة لكل مريض.

- أظهرت الدراسات أن خطر حدوث مشاكل في العين، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي أكبر لمستخدمي العدسات اللاصقة للاستخدام المتواصل أكثر من مستخدمي العدسات اليومية.

• عندما يقوم مستخدموا العدسات اللاصقة اليومية باستخدام العدسات أثناء النوم (فيما يتجاوز الاستخدام الموصى به)، فإن خطر حدوث مشاكل في العين، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي، يكون أكبر من أولئك الذين لا يرتدونها أثناء النوم.

• يمكن تقليل المخاطر الكلية لمشاكل العين، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي، عن طريق اتباع الإرشادات العناية بالعدسات بعناية، بما في ذلك تنظيف حافظة العدسة.

• أظهرت الدراسات أن المخاطر التي قد تصيب العين، بما في ذلك التهاب القرنية التقرحي، تزداد بين مستخدمي العدسات اللاصقة من المدخنين مقارنة بمستخدميها من غير المدخنين.

• لا تعرّض العدسات اللاصقة للماء خلال السباحة، أو أية رياضات مائية أخرى أو خلال الاستحمام، إذ يمكن أن يزيد من خطر التعرّض لالتهاب حاد في العين بسبب الكائنات الدقيقة والذي قد يؤدي إلى فقدان البصر. إذا تعرّضت العدسات اللاصقة للماء خلال أياً من هذه الرياضات المائية، يجب على العميل التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة. ويجب استشارة أخصائي العناية لينصح العميل بالعدسات المناسبة للنشاطات المائية.

تعليمات خاصة للاستخدام والتحذيرات الخاصة بالعدسات المخصصة للاستعمال اليومي المتكرر والاستعمال الممتد

- لا تتم بإعادة استخدام المحلول القديم في حافظة العدسات أو "التزويد عليه" نظراً لأن إعادة استخدام المحلول تقلل من التطهير الفعلي للعدسات وقد تؤدي إلى التهاب شديد، أو فقدان الرؤية، أو العمى. "التزويد عليه" يعني إضافة محلول جديد للمحلول القديم بحافظة العدسات.
- تخلص من أي محلول متبقي بعد الفترة الزمنية الموصى بها والمشار إليها على زجاجة المحلول متعدد الاستخدامات والمستخدم لتطهير ونقع العدسات اللاصقة. يشير تاريخ التخلص من المحلول إلى الوقت الذي يمكنك فيه استخدام منتج العناية بالعدسات اللاصقة بأمان بعد فتح الزجاجة. وهو ليس نفسه تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث أن تاريخ انتهاء الصلاحية هو آخر تاريخ يصلح فيه استخدام المنتج قبل فتح الزجاجة.
- يمكن أن يؤدي استخدام المحلول متعدد الأغراض بعد تاريخ التخلص منه إلى تلوث المحلول ويمكن أن يؤدي إلى التهاب شديد، أو فقدان البصر، أو العمى. لتجنب التلوث، لا تجعل طرف الزجاجة يلامس أي سطح. قم بوضع الغطاء بعد الاستخدام. لا تنتقل المحلول إلى زجاجات أو عبوات أخرى.
- لتطهير العدسات بالشكل المناسب، افرك العدسات واسطفها وفقاً لفترات فرك وشطف العدسة الموصى بها في نشرة المحلول متعدد الأغراض الداخلية. إن فرك العدسات وشطفها للوقت الموصى به يساعد في منع التهابات العين الخطيرة.
- لا تستخدم الماء، أو محلول ملحي، أو قطرات الترطيب لتطهير العدسات. هذه المحاليل لن تطهر العدسات. عدم استخدام المطهرات الموصى بها يؤدي إلى الالتهابات الشديدة، أو فقدان البصر، أو العمى.
- استبدل حافظة العدسات وفقاً لتوجيهات أخصائي العيون أو وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة التي ترافق هذه الحافظة.

يجب عدم استخدام العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses عند وجود أي من الحالات الآتية، وذلك عند وصفها لتصحيح ضعف البصر:

- إصابة الجزء الامامي للعين بالتهاب حاد أو شبه حاد أو عدوى.
- أمراض أو إصابات العين أو اختلال وظائف العين التي تؤثر على القرنية أو الملتحمة أو الجفون.
- نقص الإفراز الدمعي الحاد (جفاف العين).
- نقص الحس القرني (نقص حساسية القرنية).
- في حالة وجود أي مرض نظامي قد يؤثر على العين أو يتفاقم نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة.
- الآثار الناتجة عن الحساسية بأسطح العين أو الأجزاء المرتبطة بها والتي يمكن أن تتهيج أو تتفاقم نتيجة لارتداء العدسات اللاصقة أو استخدام محاليل العدسات اللاصقة.
- الحساسية لأحد المكونات مثل الزئبق أو الثيمبروسال الموجود بالمحلول المستخدم في العناية بالعدسات التي تم وصف استخدامها استناداً إلى جدول الإستعمال المتكرر.
- أي عدوى نشطة بالقرنية (بكتيرية، فطرية، أولية، فيروسية).
- احمرار أو احتياج العين.

وللأغراض العلاجية، قد يقوم أخصائي العناية بالعيون بوصف العدسات اللاصقة ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR PLUS، وذلك من أجل المساعدة في علاج بعض الحالات البصرية التي قد يكون من بينها الحالات المذكورة أعلاه.

تحذيرات

(الاستخدام اليومي – أقل من 24 ساعة في حالة اليقظة، الاستخدام المتواصل وخلال النوم – أكثر من 24 ساعة شاملة أوقات النوم).

يعد الاستخدام السليم لكل من العدسات اللاصقة ومنتجات العناية بالعدسات بما في ذلك حافظات العدسات أمراً مهماً للغاية من أجل الاستخدام الآمن. وقد تؤدي المشاكل الناجمة عن استخدام العدسات اللاصقة أو استخدام منتجات العناية بالعدسات إلى حدوث إصابات خطيرة بالعين.

يجب إحاطة المرضى علماً بالتحذيرات التالية حول استخدام العدسات اللاصقة:

- يتم وصف العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Daily Disposable Contact Lenses للاستخدام اليومي وللاستعمال لمرة واحدة فقط. وقد أظهرت الدراسات أن ارتداء العدسات اللاصقة اللينة لليوم الواحد يقلل من خطر بعض المضاعفات بما في ذلك عدم الراحة والالتهابات التي ترتبط بالعناية بالعدسة واستعمالها، ومن الممكن أن يعرضك إعادة استخدامها لخطر أكبر من هذه المشاكل.
- قد تؤدي المشاكل الناجمة عن استخدام العدسات اللاصقة أو استخدام منتجات العناية بالعدسات إلى حدوث إصابة بالغة بالعين. لذا يرجى إحاطة المرضى علماً بأن الاستخدام السليم والعناية بالعدسات اللاصقة ومنتجات العناية بالعدسات بما في ذلك حوافظ العدسات من بين الأمور الضرورية للاستخدام الآمن لهذه المنتجات.
- قد تتفاقم مشاكل العين بما في ذلك تقرحات القرنية بسرعة مؤدية إلى فقدان البصر.

الاستخدام اليومي/ استعمال يومي لمرة واحدة

ينصح باستخدام العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses للاستخدام اليومي – الاستخدام اليومي لمرة واحدة (أقل من 24 ساعة في حالة الاستيقاظ) كما هو مبين بالجدول 1 حيث إنها صُممت بحيث يتم ارتدائها مرة واحدة أثناء اليوم ويتم التخلص منها بعد نزعها من العين. وعند استخدامها على هذا النحو فليس هناك داعي للتنظيف أو التعقيم.

الاستخدام اليومي – الاستعمال المتكرر

يتم وصف جميع العدسات اللاصقة أكيوفيو VITA للاستخدام اليومي – لإمكانية استبدالها يومياً (أقل من 24 ساعة، خلال النهار دون النوم بها) كما هو موضح بالجدول 1، يجب أن يتم التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة كل شهر.

كل العدسات اللاصقة أكيوفيو للاستخدام اليومي عندما يتم وصفها – للاستبدال المتكرر، يجب أن يتم التخلص منها واستبدالها بعدسات جديدة كل أسبوعين.

يجب تنظيف ومسح العدسات اللاصقة ماركـة ACUVUE® Brand Contact Lenses المدرجة في الجدول 1 تحت عنوان الاستخدام اليومي – الإستعمال المتكرر في كل مرة يتم نزع العدسة فيها وتطهيرها بنظام تعقيم كيميائي فقط.

الاستخدام المتواصل وخلال النوم

يمكن استخدام العدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses الممتدة (أكثر من 24 ساعة، بما في ذلك أثناء النوم) كما هو موضح في الجدول 1، بشكل مستمر لمدة تصل إلى 7 أيام / 6 ليال ويجب التخلص منها عند الإزالة. عند استخدامها بهذه الطريقة، لا يلزم تنظيفها أو تطهيرها.

نوصي بتقييم مرتدي العدسات اللاصقة الجديدة أولاً على جدول يومي للإستبدال المتكرر إذا كان من رأي أخصائي العناية بالعيون، أن المريض مصمم على أن يكون مقبولا للاستخدام المتواصل وخلال النوم ، يتم تشجيع أخصائي العناية بالعيون على تحديد جدول زمني للارتداء المتواصل بناءً على استجابة المريض. لا يمكن لجميع المرضى تحقيق أقصى وقت لارتداء العدسات.

بمجرد إزالتها ، يوصى بأن تظل العدسة خارج العين لفترة راحة ليلة كاملة او اكثر . يجب أن يقوم أخصائي العناية بالعيون بفحص المريض أثناء الفترة الاولى من الاستخدام المتواصل للعدسات.

يمكن وضع العدسات اللاصقة ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR PLUS عندما يوصي الطبيب باستخدامها في الأغراض العلاجية بصفة يومية أو الاستخدام المتواصل وخلال النوم.

تساعد جميع العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وذلك بمنع نفاذ الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى القرنية والأجزاء الداخلية من العين.

تحذير: لا تستخدم العدسات اللاصقة التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية كبداية لنظارات العيون التي تمتص الأشعة فوق البنفسجية مثل النظارات الواقية أو النظارات الشمسية لأنها لا تغطي العين بالكامل أو المنطقة المحيطة بها. لذا يجب الاستمرار في استخدام نظارات العيون الحاجبة للأشعة فوق البنفسجية مثلما وصفت.

ملحوظة: يعد التعرض لفترة طويلة للأشعة فوق البنفسجية أحد المخاطر المرتبطة بمرض إعتام عدسة العين (المياه البيضاء). وتكمن خطورة التعرض لهذه الأشعة في عدة عوامل مثل الظروف البيئية (الارتفاع والموقع الجغرافي وسماكة السحب) وكذلك عوامل شخصية (مدى وطبيعة الأنشطة التي تتم ممارستها خارج المنزل). تعمل جميع العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses كحائل للأشعة فوق البنفسجية مما يساعد على توفير الحماية من نفاذ الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى القرنية والأجزاء الداخلية من العين. ومع ذلك، لم تثبت الدراسات الطبية أن ارتداء العدسات اللاصقة يقلل من خطر استفعال مرض إعتام عدسة العين (المياه البيضاء) أو أية اضطرابات أخرى بالعين. يرجى استشارة أخصائي العيون للحصول على المزيد من المعلومات.

جدول استخدام العدسات

يجب أن يتم تحديد جدول لاستخدام واستبدال العدسات اللاصقة بواسطة أخصائي العناية بالعيون. قد يميل المرضى في بداية الأمر إلى استخدام العدسات لفترات أطول. لذا ينبغي أن يؤكد أخصائي العيون على أهمية الالتزام بالجدول الأولي الذي يحدد الحد الأقصى لاستخدام العدسات اللاصقة. كما يعد إجراء الفحوصات الطبية، وفقاً لتعليمات أخصائي العيون، أمراً ذو أهمية بالغة.

تأتي العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses مغلفة في أشرطة معقمة منفصلة مغمورة في محلول بورات ملحي مخفف (راجع الجدول 1 للطلاع على محلول التعبئة).
لا تستخدم العدسات إذا كانت العبوة المعقمة من رقائق البلاستيك مفتوحة أو تالفة.

طبيعة الاستخدام

ACUVUE® Spherical Brand Contact Lenses العدسات اللاصقة

مصممة للاستخدام اليومي أو الاستخدام المتواصل وخلال النوم كما هو موضح في الجدول 1 لتصحيح ضعف البصر (قصر النظر وطوله) لدى الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من انعدام عدسة العين الطبيعية مع خلو عيونهم من الأمراض وتبلغ نسبة اللابورية (الاستجماتيزم) لديهم D1.00 أو أقل.

إن عدسات ACUVUE® OASYS with Transitions™ هي عدسات لاصقة فوتوكرومية مخصصة أيضاً لتخفيف الضوء الساطع حيث أنها تحتوي على مادة فوتوكرومية مضافة تمتص الضوء المرئي بشكل قوي.

العدسات اللاصقة 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON مخصصة أيضاً لتحسين مظهر العين وتغيير لون القرنية.

ACUVUE® Brand Contact Lenses for Astigmatism العدسات اللاصقة للاستجماتيزم

مصممة للاستخدام اليومي أو للاستخدام اليومي-الإستعمال متكرر كما هو موضح في الجدول 1 لتصحيح ضعف البصر (قصر النظر وطوله) لدى الأشخاص الذين يعانون أو لا يعانون من انعدام عدسة العين الطبيعية مع خلو عيونهم من الأمراض ويعانون من الاستجماتيزم (اللابورية).

ACUVUE® العدسات اللاصقة لطول النظر الشيخوخي المعدة للارتداء اليومي أو الاستعمال المتواصل، كما هو موضح في الجدول 1، معد لتصحيح طول وقصر النظر عند الأشخاص الذين يعانون من قصور البصر أو الكرويات ولهم عيون غير مؤذية ولديهم انحراف ٠.٧٥ أو أقل.

بالإضافة إلى ذلك، العدسات اللاصقة ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR PLUS

مصممة أيضاً للاستخدام العلاجي كعدسات ضمادة لعلاج الحالات البصرية الحادة والمزمنة التالية:

- لحماية القرنية في حالات اضطراب الجفن والقرنية مثل الشتر الداخلي وتشعر الأهداب وندوب الغضروف الجفني وتآكل القرنية المتكرر. بالإضافة إلى ذلك، فهي مخصصة للوقاية حيث قد تؤدي قطوب الجراحة أو تشوه النسيج العيني أو التنكس أو الشلل إلى الحاجة لحماية القرنية من التعرض إلى الالتهاب المتكرر.
- لتهدئة ألم القرنية في بعض الحالات مثل تآكل وسحج اعتلال القرنية الفقاعي الظهاري والتهاب القرنية الخطي وما بعد رأب القرنية
- تُستخدم كحائل أثناء معالجة الأمراض الظهارية مثل الأمراض الظهارية المزمنة وقرحة القرنية والتغذوي العصبي والتهاب القرنية بالشلل العصبي والحروق الكيميائية.
- لحالات ما بعد الجراحة حيث يُنصح باستخدام عدسة ضمادية مثل ما بعد الجراحة الانكسارية والرقعات الصفاحية وتورمات القرنية والحالات الجراحية العينية الإضافية.
- للنبات الهيكلي والحماية عند تركيب عدسات piggyback في الأماكن التي تكون فيها القرنية والأسطح المرتبطة بها غير مستوية بما يتيح تركيب عدسات RGP. بالإضافة لذلك، يمكن أن يمنع استخدام العدسات التهيج والكشط في الحالات التي يكون فيها فروق في الارتفاع في النسيج المصاب أو الرابط يمكن ارتداء عدسات ACUVUE OASYS® اللاصقة مع HYDRACLEAR PLUS® بشكل يومي أو على المدى الطويل وذلك عند وصفها للاستخدام العلاجي.

مفتاح الرموز

قد تظهر الرموز التالية على الملصق أو العبوة

الرمز	التعريف
 	تحذير و مراجعة نشرة التعليمات
	المصنع
	تاريخ التصنيع
	صالح حتى تاريخ (تاريخ انتهاء الصلاحية)
	رمز المجموعة
	معقمة باستخدام حرارة البخار
	لا تستخدم في حالة تلف العبوة
	لا يعاد استخدامها (استخدام لمرة واحدة فقط)
DIA	القطر
BC	الانحناء الخلفي
D	الديويوتر (وحدة قياس قوة العدسة)
CYL	قوة استطوانة العدسات
AXIS	المحور
MAX ADD	أعلى إضافة قريبة يمكن تصحيحها
LOW	إضافة "اخفض"
MID	إضافة "متوسطة"

الرمز	التعريف
HGH	إضافة "أعلى"
S_H	وميض طبيعي™
S_p	البريق الطبيعي™
V	نمط مشرق
A	نمط تحديد
N	تألق طبيعي™
RB	مشع مشرق™
RC	سحر مشع™
 2797	رمز نظام شهادة الجودة مع الرقم المرجعي لمكتب التحقق المانع لعلامة الجودة الأوروبية
 UV Blocking	حجب الأشعة فوق البنفسجية
	الرسوم المدفوعة لإدارة التفايات
	تحذير: يحظر القانون الفيدرالي الأمريكي بيع هذه الأداة إلا بواسطة الأطباء الممارسين المرخضين أو بأمر منهم
	الاتجاه العدسات الصحيح
	الاتجاه العدسات غير صحيح (العدسات مقلوبة)
	"علامة التعريف" لأوراق الشحن والتغليف
	"علامة التعريف" للمواد المركبة
	الوكيل المعتمد في الاتحاد الأوروبي

الجدول 1

نوع العدسات واسم العلامة التجارية	الاستخدام المقصود ومعدل الاستخدام			المادة	نسبة محتوى البوليمر/ الماء (%)	محتوى التعبئة
	للاستخدام اليومي واستبدال يومي لمرحلة واحدة	للاستخدام اليومي والاستعمال المتكرر	للاستخدام المؤقت وخلال النوم			
العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Spherical Contact Lenses – مع التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية						
ACUVUE® 2® Brand Contact Lens		⊙	⊙	إيتافيلكون أ	42/58	①
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	⊙			إيتافيلكون أ	42/58	①
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses with LACREON®	⊙			إيتافيلكون أ	42/58	③
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	سينوفيلكون أ ④	62/38	②
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses with HydraLuxe™	⊙			سينوفيلكون أ ④	62/38	②
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses WITH HYDRACLEAR® 1	⊙			نارا فيلكون أ ④	54/46	②
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	⊙			إيتافيلكون أ	42/58	③
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses		⊙		سينوفيلكون ج ④	59/41	②
ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™		⊙		سينوفيلكون أ ④ ⑤	62/38	②
العدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses للأستجماتيزم – مع التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية						
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM WITH LACREON®	⊙			إيتافيلكون أ	42/58	③
ACUVUE® VITA® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM		⊙		سينوفيلكون ج ④	59/41	②
ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRALUXE®	⊙			سينوفيلكون أ ④	62/38	②
ACUVUE® OASYS® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	سينوفيلكون أ ④	62/38	②
العدسات اللاصقة من النوع PRESBYOPIA التظليل وحاجب الأشعة فوق البنفسجية						
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses MULTIFOCAL	⊙			إيتافيلكون أ	42/58	③
ACUVUE OASYS® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS		⊙	⊙	سينوفيلكون أ ④	62/38	②

① محتول ملحي مختلف ② محتول ملحي البورات مضاد إيه الميثيل الأثير السيليكون ③ محتول ملحي البورات ملحي مضاد إيه بوفيريون
 محتوي المادة ④ تحتوي المادة المصنعة منها العدسات على سيليكون وتتوافق مع الدرجة الأولى لمقاييس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مع نسبة تفلت للأشعة أقل من ١٪ بالأشعة فوق البنفسجية B (280-315nm) و ١٠٪ بالأشعة فوق البنفسجية A (316-380nm). أ كل منتجات إيتافيلكون أ تتوافق مع الدرجة الثانية لمقاييس الحماية من الأشعة فوق البنفسجية. مع نسبة تفلت أقل من ٥٪ للأشعة فوق البنفسجية B و ٥٠٪ للأشعة فوق البنفسجية A
 ⑤ تحتوي مواد العدسة على مادة فوتوكرومية مسطحة تمتص بشدة الضوء المرئي في العدي من ٣٨٠ نانومتر إلى ٧٨٠ نانومتر بعد أدنى ٨٥٪ من التقلية في الحالة المعطبة (العلقة) وبعد أدنى ٢٢٪ من التقلية في الحالة النشطة (المتفوحة) بحسب سمك العدسة ومستوى الأشعة فوق البنفسجية الصامتة والأشعة المرئية العالية (HEV).

عربي

هام: الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية والاحتفاظ بهذه المعلومات للاستخدام فيما بعد. المعنى بقراءة هذه النشرة الطبية الإرشادية هم أخصائيو العناية بالعيون، لكن يجب تقديمها للمرضى عند الطلب. تحتوي هذه النشرة على معلومات هامة حول الاستخدام الصحيح للعدسات اللاصقة من النوع ACUVUE® Brand Contact Lenses المسردة في الجدول 1، كما تحتوي على معلومات حول الأعراض الجانبية وموانع استعمال هذه العدسات.

تقدم شركة Johnson Medical Limited & Johnson دليل إرشادات المرضى الخاص بالعدسات اللاصقة ACUVUE® Brand Contact Lenses والذي يشمل على مزيد من المعلومات لمستخدمي العدسات اللاصقة. يجب أن يقدم أخصائي العيون للمرضى دليل إرشادات المرضى الملانم للعدسات الموصوفة للمريض النسخ متوفرة على موقع ACUVUE® الإلكتروني المحلي.

هام : الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية والاحتفاظ بهذه المعلومات للأستخدام فيما بعد.....

هام: الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية والاحتفاظ بهذه المعلومات للاستعانة بها فيما بعد

العدسات اللاصقة ACUVUE®

Contact Lenses

النشرة الطبية الإرشادية

CE
2797